

The materials and information provided via this brochure are distributed internationally, but not all the products or services found on this brochure are necessarily available in your country or area. Please contact local office or agents to make sure of the availability of the relevant products or services.

Mindray Medical Netherlands B.V.

Drs.W.van Royenstraat 8, 3871 AN Hoevelaken, The Netherlands
Voice: (31-33) 254-4911
Fax: (31-33) 253-4280

Mindray Medical Italy S.r.l.

Via Leonardo DA Vinci, 158, 20090 Trezzano Sul Naviglio (MI), Italy
Voice: (39-02) 5737-401
Fax: (39-02) 5523-2018

MindrayMedicalEspaña S.L.

Avenida Manoteras 38, Edificio B, Bajo B008. 28050-Madrid Spain
Voice: (34-91) 392-3754
Fax: (34-91) 392-3756

Mindray Medical Germany GmbH

Zwischen den Bächen 4, 64625 Bensheim, Germany
Voice: (49) 6251-17524-0
Fax: (49) 6251-17524-20

Mindray (UK) Limited

3 Percy Road, St Johns Park, Huntingdon, Cambs, PE29 6SZ United Kingdom
Voice: (44) 1480-416-840
Fax: (44) 1480-436-588

Mindray Medical France SARL

Europarc Creteil 1 allée des cerisiers 94000 CRETEIL, France
Voice: (33-1) 4513-9150
Fax: (33-1) 4513-9151

Mindray Medical Sweden AB

Rissneleden 136, 174 57 Sundbyberg, Sweden
Voice: (46) 8 555 54 121
Fax: (46) 8 555 54 101

Mindray Medical Rus Co.Ltd

2 Zvenigorodskaya Street, 13, bld 41, 123022 Moscow, Russia
Voice: (7-499) 553-6036
Fax: (7-499) 553-6039

Mindray Medical Colombia S.A.S

Room No.702, Torre UNIKA,Carrera 9 No.77-67, Bogota, Colombia
Voice: (57-1) 3130892 / 3210916

Mindray do Brasil – Comércio e Distribuição de Equipamentos Médicos Ltda.

Rua Tavares Bastos, 329, Perdizes, São Paulo - SP, CEP 05012-020
Voice: (55-11) 3124-8026
Fax: (55-11) 3078-8035

Mindray Medical Mexico S. de R.L. de C.V.

Félix Parra # 175 Colonia, San José Insurgentes Sur Delegación Benito Juárez, 03900 México, D.F.
Voice: (52-55) 5661-9450 / (52-55) 5662-6620
Fax: (52-55) 5662-6597

PT.Mindray Medical Indonesia

The East 11th Floor, Unit 08 Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E 3.2 No.1 Jakarta 12950
Voice: (6221) 2902-7280
Fax: (6221) 2902-7283

Mindray Medical Egypt

Ground Floor-11 El Imam Metwally El Sharawi Street, Sheraton Heliopolis - El Nozha, Cairo, Egypt
Voice: (2) 02 22691047
Fax: (2) 02 22691046

Mindray Medical India Pvt. Ltd. (Delhi Office)

16th floor, Building No. 9-B, DLF Cyber City, DLF Phase- 3, Gurgaon- 122002, Haryana
Voice: (91-124) 4632-488
Fax: (91-124) 4632499

Mindray Medical India Pvt. Ltd. (Mumbai office)

B-404, City Point, Andheri Kurla Road, Andheri East, Mumbai, 400 059, India
Voice: (91-22) 4020-0000
Fax: (91-22) 4020-0011

Mindray Medikal Teknoloji Istanbul Ltd. Sti.

KÖYALTI MEVKİLİ 29 EKİM CAD.N.1 KUYUMÇUKENT 2.NO.PLZ.3.KT. D.1- 9 34520 BAĞÇELİEVLER/YENİBOSNA, İSTANBUL, TÜRKİYE
Voice: (90-212) 482 08 77
Fax: (90-212) 482 08 78

Mindray Medikal Teknoloji Istanbul Ltd. Sti. Branch Office Ankara


TURAN GÜNEŞ BULVARI ALEKSANDER DÜBÇEK CAD. NO:18/A ÇANKAYA/ANKARA, TÜRKİYE
Voice: (90-312) 441 96 92
Fax: (90-312) 441 96 93

Mindray Medical Vietnam Co.,Ltd.

Unit 2, 4th Floor, "B" Building, Broadway Office Park, 102 Nguyen Luong Bang Blvd., Tan Phu Ward, Dist. 7, HCMC, Vietnam
Voice: (84) 8 5413-6970
Fax: (84) 8 5413-6971

Mindray Medical Thailand Limited

1768 Thai summit Tower Room 407, 4th floor, New petchaburee Road, Kwaeng Bangkokpi, Khet Huai Khwang, Bangkok 10320, Thailand
Voice: (66) 2652-7288
Fax: (66) 2652-7266

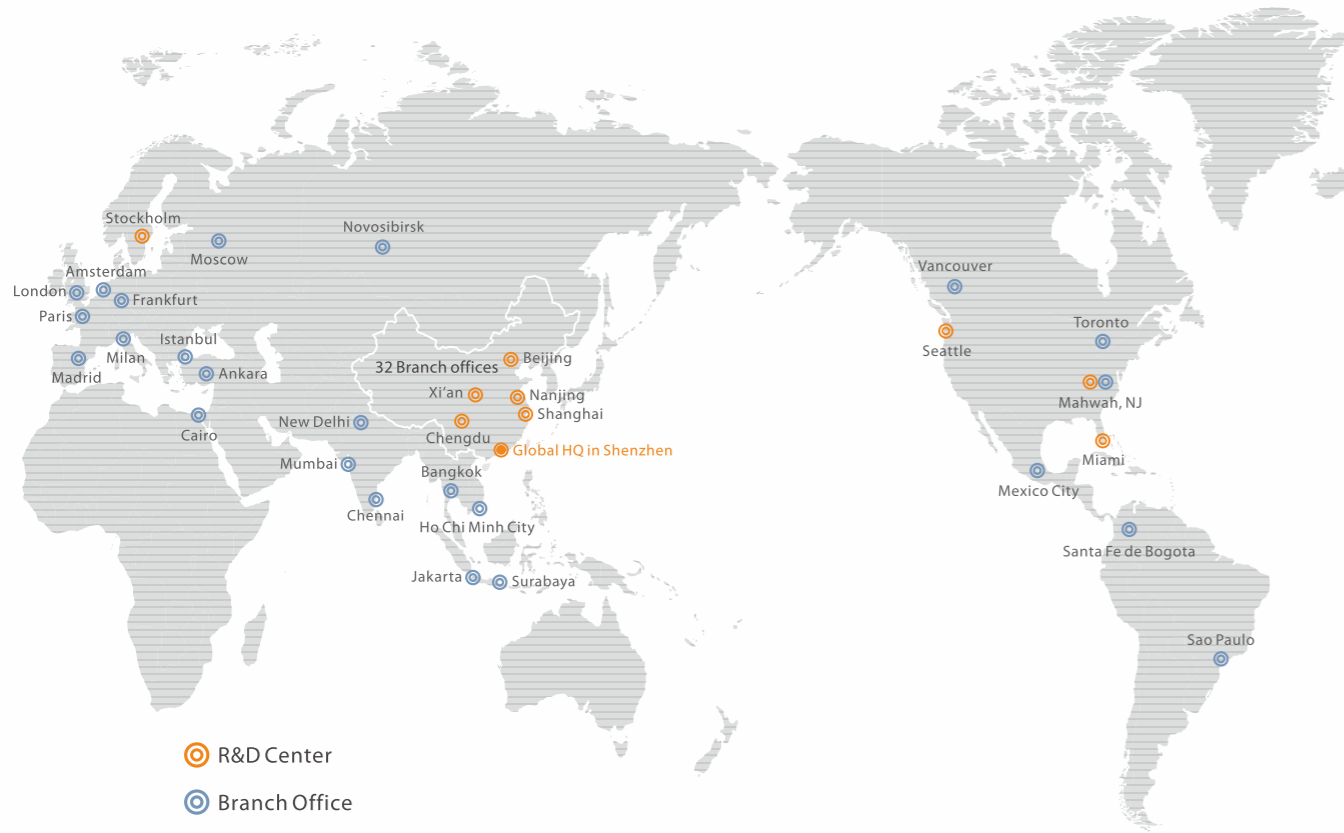

HyBase 3000

Mesa de operaciones



Mindray Building, Keji 12th Road South, High-tech Industrial Park, Nanshan, Shenzhen 518057, P.R. China
Tel: +86 755 8188 8998 Fax: +86 755 26582680
E-mail: intl-market@mindray.com www.mindray.com

mindray is a trademark of Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.
©2013 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. All rights reserved. Specifications subject to changes without prior notice.
P/N:ES-HyBase3000-420285x6-20170207

mindray
healthcare within reach

HyBase 3000

Práctica funcionalidad, versatilidad y alta fiabilidad

Presentación funcional del panel remoto



Posición normal



Desplazamiento longitudinal al sentido de cabecera



Elevación de la mesa



Descenso de la mesa



Posición de Trendelenburg



Posición de Trendelenburg inversa



Giro a la izquierda



Giro a la derecha



Elevación de placa de respaldo



Descenso de placa de respaldo



Posición flexionada



Posición cóncava



Posición "0"



Elevación del reposacabezas



Descenso del reposacabezas

Elevación y descenso de la placa para piernas, 180° de separación



Flexibilidad máxima



Elevador integrado para puentes torácico y renal



Con un diseño especial adaptado a la cada vez más compleja infraestructura quirúrgica, HyBase requiere menos esfuerzo y tiempo para colocar al paciente en una posición segura, cómoda y práctica. Tras analizar las necesidades de los cirujanos y el personal de enfermería, la respuesta de Mindray es una mesa de operaciones que constituye una solución total e incluye lo siguiente:

- Colchón de mejor calidad para mayor comodidad de los pacientes
- Sistema de colocación del paciente seguro y práctico
- Tecnología para maximizar la versatilidad



- Colchón de descompresión con diseño antiestático, impermeable y de una pieza
- Desplazamiento longitudinal máximo hasta 300mm libre de los arcos en "C"
- Capacidad máxima de elevación hasta 230kg
- Capacidad para 185kg en posición normal
- Alimentación por batería para 50-80 intervenciones
- Sistema de freno mecánico para una estabilidad óptima
- Restablecimiento de la posición original con un botón
- Posición flexionada y cóncava con un botón
- Placa radiotransparente para facilitar el acceso al brazo en C
- Tres paneles de control con panel remoto, control de reserva y pedal

Gama perfecta de productos Mindray para quirófano

Los productos fiables e innovadores de Mindray se complementan a la perfección entre sí para ofrecerle el mejor servicio posible.



HyBase 3000

La técnica de posicionamiento más adecuada para todas las disciplinas quirúrgicas

El éxito de una operación comienza con el perfecto posicionamiento del paciente y para ello se necesita un acceso cómodo, resultados excelentes, ahorro de tiempo y eficiencia. La excepcional flexibilidad de HyBase 3000 junto con sus diversos accesorios hace posible proceder a cualquier posicionamiento del paciente de manera rápida y segura.



Posición para intervención intervertebral

Accesorio:
0092-30-102639 Almohadilla para intervenciones intervertebrales (espuma viscoelástica, una pieza)
115-005864-00 Almohadilla para posición prone
0092-30-102634 Placa para brazos



Posición para cirugía rectal

Accesorio:
115-007049-00 Dispositivo de colocación para intervenciones rectales
115-005864-00 Almohadilla para posición prone
115-005872-00
0092-30-102640 Correa para el tronco, una pieza
0092-30-102634 Placa para brazos



Posición para intervención en brazos o manos

Accesorio:
115-007047-00 Mesa de operaciones para brazos
005872-00 Almohadillas para cabeza en forma de flotador (200 x 70 x 50 mm)



Posición supina general para movimiento longitudinal hacia el lado de la cabeza de 300mm

Accesorio:
115-012835-00 Almohadillas para cabeza en forma de flotador (200 x 70 x 50 mm)

Usamos acero inoxidable de alta calidad para las mesas de operaciones y los accesorios. Para facilitar el acceso de los cirujanos al brazo en C, las almohadillas y las placas son radiotransparentes para los exámenes radiográficos. Para evitar lesiones en áreas sensibles de los pacientes, suministramos almohadillas de gel de textura similar al tejido humano para colocar a los pacientes.



Posición general para intervención de tiroides



Posición para intervención oftálmica

Accesorio:
115-007045-00 Placa para intervenciones oftálmicas
115-005872-00 Almohadillas para cabeza en forma de flotador (200 x 70 x 50 mm)
0092-30-102642 Adaptador de reposacabezas para neurocirugía



Posición para neurocirugía

Accesorio:
115-012835-00 Reposacabezas en forma de herradura ajustable
0092-30-102642 Adaptador de reposacabezas para neurocirugía



El adaptador para neurocirugía permite conectar el marco Mayfield

Accesorio:
0092-30-102642 Adaptador de reposacabezas para neurocirugía

HyBase 3000

La técnica de posicionamiento más adecuada para todas las disciplinas quirúrgicas

Desarrollados en estrecha colaboración con los usuarios finales, estos accesorios satisfacen todas las necesidades que surgen durante los procedimientos de colocación para la intervención quirúrgica y permiten colocar a los pacientes de forma óptima tanto para los cirujanos como para los pacientes.



Posición de litotomía para ginecología y urología

Accesorio:
115-007043-00 Un par de soporte parapiernas con cintas y una abrazadera radial universal ligera
115-013018-00 Cubeta de desagüe para ginecología y urología



Posición de litotomía

Accesorio:
0092-30-102635 Soporte para piernas pesado de una pieza, abrazadera radial universal pesada, almohadilla y correa de sujeción (una pieza).
115-013018-00 Cubeta de desagüe para ginecología y urología



Posición lateral para cirugía mínimamente invasiva

Preparación rápida para cirugía mínimamente invasiva con elevador integrado de 120 mm



Posición lateral para cirugía mínimamente invasiva

Accesorio:
0092-30-102634 Placa para brazos
0092-30-102648 Soporte de brazos para posición lateral
0092-30-102638 Soporte para partes grandes del cuerpo
0092-30-102669 Soporte para partes pequeñas del cuerpo
115-005811-00 Almohadillas para brazos y piernas laterales
115-005811-00 Almohadilla para brazos y piernas



Posición para intervención femoral

Accesorio:
115-009425-00 Dispositivo de extensión para ortopedia con carro de transporte



Posición lateral para intervención femoral

Accesorio:
115-007057-00 Extensión de fémur lateral
115-009425-00 Extensión para ortopedia preseleccionada



Posición para intervención de tibia

Accesorio:
115-007055-00 Extensión de tibia
115-009425-00 Extensión para ortopedia preseleccionada



Posición para intervención de tibia

Accesorio:
115-007055-00 Extensión de tibia
115-009425-00 Dispositivo de extensión para ortopedia con carro de transporte



Traumatología para el cuello del fémur


Accesorio:
115-007055-00 Extensión de tibia
115-009425-00 Dispositivo de extensión para ortopedia con carro de transporte

HyBase 3000

Todas las características fiables e innovadoras de Mindray



Gracias a los nuevos cojines de SFC (con núcleo de espuma especial), HyBase 3000 proporciona una excelente distribución de la presión, evita en gran medida los efectos adversos de la posición de decúbito, reduce el porcentaje de riesgos postoperatorios para la salud y acelera la recuperación del paciente.

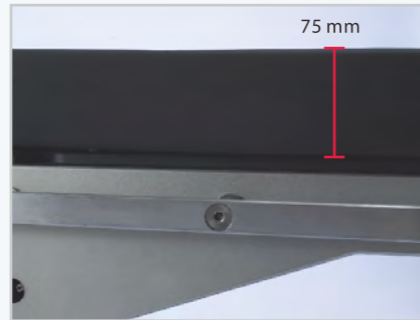

El paciente se sentirá verdaderamente cómodo gracias a sus almohadillas con 75 mm más de grosor y doble capa en el interior.




El extraordinario material GORE-TEX es respirable, impermeable, no inflamable, antiestático y cumple con los estándares de higiene.



Los cojines pegados o cosidos de manera habitual no pueden lavarse directamente, por lo que la limpieza de las manchas de sangre y fluidos, que pueden constituir un peligro para la salud tanto de cirujanos como de pacientes, constituye un problema. Gracias a la tecnología avanzada de sellado por ultrasonido, nuestro excelente cojín impermeable no le planteará ese problema.



El pedal proporciona una máxima seguridad y es fácil de usar.

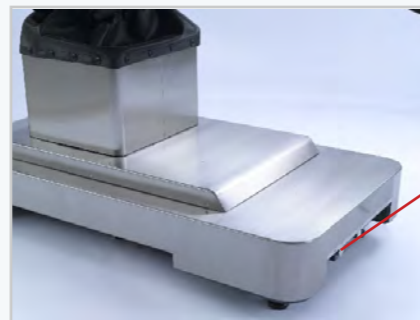

La alimentación por batería dura de 50 a 80 intervenciones. Teclas de control de reserva en caso de fallo del control manual. Cubierta inoxidable opcional

Control de reserva
Desplazamiento longitudinal*
hacia arriba/abajo
Trendelenburg
Trendelenburg inversa
Giro a izquierda/derecha
Elevación/descenso de la
placa de respaldo


*Función opcional

HyBase 3000


Mesa Quirúrgica Electro-Hidráulico

Especificaciones técnicas


| Dimensiones | |
|--------------------------|-----------------|
| Longitud total | 2.060 mm |
| Altura sin almohadillas | 720 mm-1.070 mm |
| Anchura sin riel lateral | 520 mm |
| Anchura con riel lateral | 590 mm |

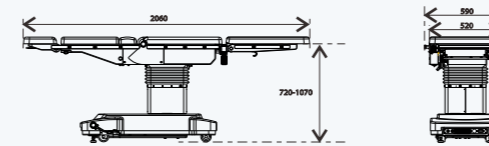


| Posición de Trendelenburg | |
|---------------------------|----------|
| Trendelenburg | Máx. 30° |
| Trendelenburg inversa | Máx. 30° |

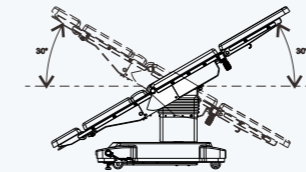


| Placas para piernas | |
|----------------------------------|----------|
| Elevación de placas para piernas | Máx. 20° |
| Descenso de placas para piernas | Máx. 90° |

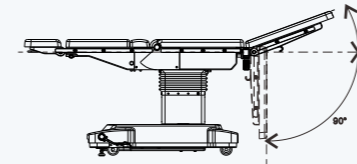


| Posición cóncava | |
|----------------------|------|
| Posición cóncava | 110° |
| Trendelenburg | 25° |
| Montaje hacia arriba | 45° |

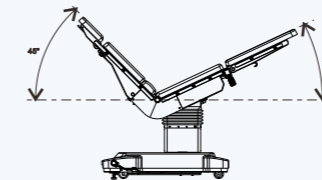


| Desplazamiento longitudinal (opcional) | |
|----------------------------------------|-------------|
| Desplazamiento de extremo de cabeza | Máx. 300 mm |

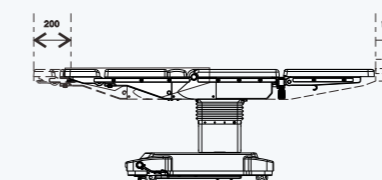


| Inclinación lateral | |
|----------------------------|----------|
| Inclinación a la izquierda | Máx. 25° |
| Inclinación a la derecha | Máx. 25° |

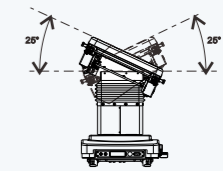


| Placa para espalda | |
|--------------------------------|----------|
| Elevación de placa de respaldo | Máx. 80° |
| Descenso de placa de respaldo | Máx. 40° |

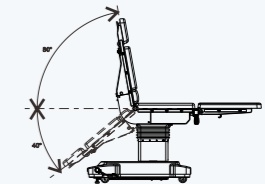

| Placa para cabeza | |
|-----------------------------------------------|----------|
| Desplazamiento normal de placa para cabeza | Máx. 45° |
| Desplazamiento extendido de placa para cabeza | Máx. 90° |

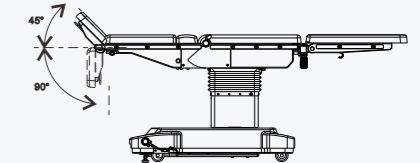

| Posición flexionada | |
|-----------------------|------|
| Posición flexionada | 220° |
| Trendelenburg inversa | 20° |
| Montaje hacia abajo | 20° |

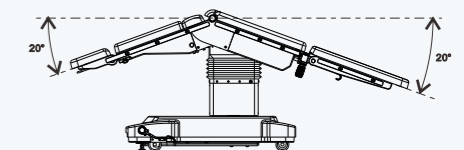

| Elevador de tronco (opcional) | |
|---------------------------------|-------------|
| Elevación de elevador de tronco | Máx. 120 mm |

